

מבוא

הטיפול ב- Handy Cure s' מאיץ את ריפוי הרקמה הפגועה, התחדשות התאים ומשפר את זרימת הדם באזור

Handy Cure s' הינו מכשיר לייזר נמוך עוצמה (LLLT) המשלב אנרגיית לייזר פועמת (פולסים), אנרגיית אור אינפרא אדום רחבת פס, אור אדום גלוי ושדה מגנטי סטטי, המספקים יחדיו אפקט טיפולי משולב. איחוד כל האנרגיות הללו יחד במכשיר אחד הוכח כמשיג תוצאות קליניות מהירות ויעילות בתוך זמן קצר יחסית.

Handy Cure s' יעיל במיוחד במקרים של תאים דלקתיים. שרשרת אירועים ברמת רקמת התא, מובילה למצב פתולוגי של דלקת הגורמת לירידה באספקת הדם לתאים ולפגיעה איסכמית. כל פעולה העשויה לקצר את משך המצב האיסכמי, תשפיע לטובה על מהלך המחלה והכאב הנלווה.

Handy Cure s' מזרז הקלה והחלמה בשימוש בנפרד או ביחד עם טיפולים רפואיים אחרים. הטיפול מביא להפחתה בצורך בתרופות משככות כאבים ונוגדות דלקת.


- * טיפול לא פולשני
- * ללא כאבים
- * ללא תופעות לוואי
- * בטוח לשימוש
- * קל לשימוש
- * קומפקטי

הוראות הפעלה

1. להפעלת המכשיר, הנח את המכשיר מול כף היד (תמונה 2) ולחץ על לחצן Stop/Start. המכשיר יבצע בדיקה עצמית* (הנוריות יבהבו). כאשר ידלקו שתי נוריות ירוקות המכשיר מוכן לשימוש.
2. בחר בתוכנית הרצויה באמצעות לחצן Mode על פי ההנחיות בעמוד 3.
3. להתחלת הטיפול, לחץ על לחצן Stop/Start. נורית הטיפול תחל להבהב. החזק את המכשיר באזור הרצוי למשך זמן הטיפול.
4. בסיום הטיפול, נורית הטיפול תפסיק להבהב וישמע צפצוף. לחץ על לחצן Stop/Start על מנת לחזור על אותו הטיפול.
5. ניתן להפסיק את הטיפול בכל עת על ידי לחיצה על לחצן Start/Stop. לסגירת המכשיר לחץ על לחצן Stop/Start למשך 3 שניות.



תמונה 2

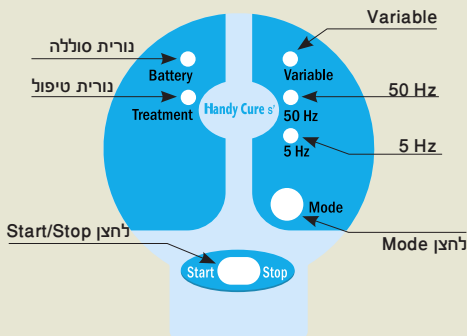

תמונה 1

* חשוב: **Handy Cure s'** מבצע בדיקה עצמית פעם ב- 24 שעות. כאשר פתיחת המכשיר לא מתבצעת מול כף היד המכשיר מצפצף ו- 4 נוריות מהבהבות. יש לסגור את המכשיר ולהפעילו מחדש מול כף היד.

הנחיות הטיפול ב- Handy Cure s'

ניתן לבחור בתוכנית אחת מבין שלושת התוכניות המוצעות לטיפול במצבי כאב שונים.

הבחירה בתוכנית הטיפול מתבצעת על ידי לחיצה על לחצן Mode. כל תוכנית משתמשת בתדירות אור שונה כפי שמצוין בטבלה מטה. השינוי בתדירות האור מציינת את עומק חדירת אור הלייזר.

5 Hz	50 Hz	Variable	תוכנית
כאב כרוני	כאב אקוטי	טיפול ראשוני	טיפול
5 Hz/Sec	50 Hz/Sec	1000-2500 Hz/Sec	תדירות פולסים
5 דקות	5 דקות	5 דקות	משך פעולת התוכנית



אופן הטיפול


- סדרת טיפולים הינה בת שלושה שבועות (21 יום).
- בשבוע הטיפולים הראשון, הטיפול יעשה בתוכנית Variable. המשך הטיפול יעשה בתוכנית 5Hz או 50Hz לפי הטבלה בעמוד 5.
- בכאבים כרוניים, מומלץ לבצע טיפול פעמיים ביום במשך שבוע הטיפולים הראשון.
- הקלה בכאב צפויה לאחר שבועיים. במקרים כרוניים קשים, יתכן וההקלה בכאב תופיע לאחר מספר טיפולים רב יותר.
- בסיום סדרת טיפולים (21 יום), יש לבצע 3 ימי הפסקה ובאם יש צורך לשוב לסדרת טיפולים נוספת.
- ניתן להפסיק את הטיפול עם הפגת הכאב. עם זאת, מומלץ להשלים את סדרת הטיפולים.

אזורי טיפול

מומלץ לבצע את הטיפול על עור חשוף על מנת לשפר את חדירת האור לרקמה.

במהלך הטיפול יש להניח את המכשיר על האזור המטופל באופן קבוע. במידה ומדובר באזור נרחב, יש לסרוק עם המכשיר את האזור בתנועה איטית.

במידת הצורך, ניתן לבצע טיפול גם מעל בגד או תחבושת רפואית.

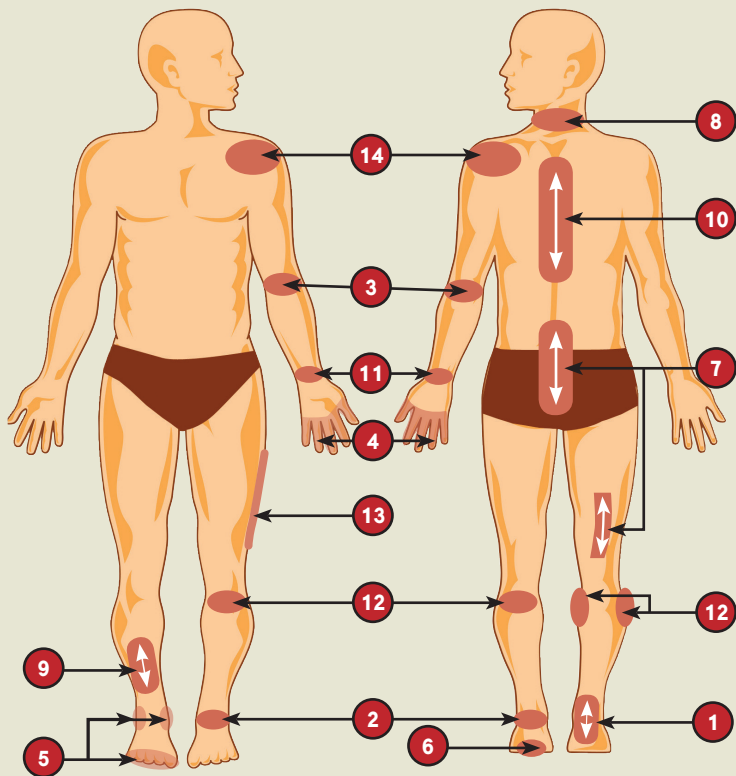

תוכנית שבוע שני ושלישי	תוכנית שבוע ראשון	אזור טיפול ומספר טיפולים	
50 Hz	Variable	גיד אכילס - 2 טיפולים רצופים משני צידי האכילס	1
50 Hz	Variable	קרסול - 2 טיפולים רצופים מלפנים ומאחורי הקרסול	2
50 Hz	Variable	מפרק המרפק (מפרק טניס, מפרק גולף) 2 טיפולים רצופים משני צידי המרפק	3
50 Hz	Variable	אצבעות הידיים (דלקת מפרקים, תהליכים קדם-טראומטיים) - 2 טיפולים רצופים משני צידי האצבעות	4
50 Hz	Variable	כפות הרגליים, אצבעות הרגליים, שוק כף הרגל - 3 טיפולים רצופים משני צידי הקרסול וחלק עליון של כף הרגל	5
50 Hz	Variable	דורבן עצם העקב - 2 טיפולים רצופים מאחורי העקב ומתחתיו	6
50 Hz	Variable	כאב בגב תחתון (בעיות דיסק בין חולייתיות, עצב האישיאס) - 3 טיפולים רצופים באזור הגב התחתון, וטיפול נוסף בירך האחורית	7
50 Hz	Variable	עמוד שדרה צווארי, מיגרנות, כאבי ראש 2 טיפולים רצופים בעורף הצוואר	8
50 Hz	Variable	קידמת השוק - 2 טיפולים רצופים באזור הפגוע	9
50 Hz	Variable	עמוד השדרה (אוסטאוכונדרוזיס) 4 טיפולים רצופים לאורך עמוד השדרה והאזור הפגוע	10
50 Hz	Variable	שורש כף היד (תסמונת הכתיבה) 2 טיפולים רצופים משני צידי שורש כף היד	11
50 Hz	Variable	מפרק הברך - 4 טיפולים רצופים מכל צידי הברך	12
5 Hz	Variable	מפרק הירך - 4 טיפולים רצופים באזור הכואב	13
5 Hz	Variable	כתף - 2 טיפולים מלפנים ו-2 טיפולים מאחורי הכתף	14

* דלקת מפרקים (ארטריטיס), פגיעה ברצועות וגידים, שחיקת סחוס, יש לטפל

באזור הכאב כמפורט בטבלה

* **כאבים אקוטיים** דוגמת כאבי שרירים, גידים וחבלות שאינם מפורטים בטבלה יש לבצע 2 טיפולים רצופים בתוכנית Variable למשך שבועיים או עד חלוף הכאב.

בטיחות

יש להשתמש במכשיר אך ורק בהתאם לכללי הבטיחות והוראות ההפעלה המופיעות במדריך.

ההחזקה והשירות עבור **Handy Cure s'** יבוצעו על ידי צוות מדיקל קוונט או על ידי גוף מוסמך אחר שקיבל אישור בכתב ממדיקל קוונט בע"מ. לפני השימוש יש לקרוא את החוברת במלואה. חשוב לשמור על החוברת בהישג יד לצורך עזרה בהפעלה ובטיפול.

- יש להימנע מחדירת אור הלייזר ישירות לעיניים.
- השימוש ב- **Handy Cure s'** באזור הרחם אסור לנשים בהריון.
- אין לטפל בקרבת קוצב לב.
- השימוש במקרי סרטן אינו מומלץ.
- יש להשתמש במשקפי מגן בכל טיפול באזור העיניים או הפנים.
- העדשה המוברגת על גבי המכשיר מהווה חלק בלתי נפרד מהמכשיר.
- אין להוציא את העדשה אלא לצורך ניקוי.
- בעת הטיפול, חובה על העדשה להיות מוברגת במקומה על גבי המכשיר.
- יש להחזיק את ה- **Handy Cure s'** הרחק מהישג ידם של ילדים.
- הטיפול בילדים מתחת לגיל 18 שנה ייעשה בהשגחת מבוגרים בלבד.

טיפול וניקיון

- ניתן לנקות את ה- **Handy Cure s'** עם מטלית לחה.
- במידה והעדשה המוברגת על גבי המכשיר הוצאה לצורך ניקוי, יש להחזירה מיד בתום הניקוי.
- אין לחשוף את ה- **Handy Cure s'** לטמפרטורות קיצוניות, לחות או קרינת שמש ישירה.
- טמפרטורת אחסון המוצר: -20°C עד 50°C

איתור תקלות

תיקון התקלה	סיבה אפשרית	תקלה
חבר את ה- Handy Cure s' למטען עד שנורית הסוללה מתחלפת לירוק. ניתן להשתמש במכשיר בזמן ההטענה.	הסוללה הנטענת התרוקנה	נורית הסוללה דולקת באדום
יש להפעיל את המכשיר לפי ההוראות בעמוד 2, סעיף 1	הפעלה לא נכונה של המכשיר	המכשיר מצפצף 4-1 נוריות מהבהבות
צור קשר עם הסוכן לצורך תיקון המכשיר	תקלה טכנית במכשיר	

הערה: בזמן הטיפול נראה לעין האור האדום בלבד. במידה ולא נדלק אור אדום בזמן הטיפול אנא פנה לסוכן.

שאלות נפוצות

האם אחוש משהו במהלך הטיפול?

לרוב לא חשים בדבר זה טוב. לעיתים רחוקות ניתן לחוש באפקט מחמם. למרות שלא חשים בדבר במהלך הטיפול, אור הלייזר חודר לרקמה ומבצע את הטיפול.

מתי אחוש הקלה בכאב?

הדבר תלוי בחומרת מצבך, כאשר הממוצע הוא בין 10-14 ימי טיפול, מטופלים רבים יחוו הקלה בכאבים לאחר 3-4 ימי טיפול ולאחר טיפולים נוספים יחוו בשיפור משמעותי. התגובה לטיפול אינדיבידואלית לכל מטופל, לכן יש להמשיך לטפל עד להפחתת הכאבים.

האם הכאב יכול להחמיר?

במקרים בודדים מורגשת החמרה בכאב לאחר מספר טיפולים כתוצאה משיפור בזרימת הדם. במצב כזה, יש להפסיק את הטיפול למשך 3 ימים ולאחר מכן לחזור לטיפול יומיומי. תוך מספר טיפולים תחושה הקלה בכאב.

האם הלייזר יכול לגרום כוויות?

לא. **Handy Cure s'** הינו לייזר- דרגה 1.

מידע טכני

60-90 mW : עוצמה ממוצעת : עוצמה כוללת :
0.4-6.25 mW : עוצמת לייזר :
30-90 mW : עוצמת אור אינפרא אדום :
2-10 mW : עוצמת אור אדום :

25-45 mT : שדה מגנטי :

905 nm : אורכי גל : אורך גל לייזר :
875 nm : אורך גל אינפרא אדום :
635 nm : אורך גל אדום :

25 W : עוצמת הלייזר :
25 W : מקסימום עוצמת פעימות הלייזר :

ציוד דרגה 2 , סוג B

לייזר- דרגה 1 (IEC 60825-1)
ערכי אספקת חשמל: 13 VDC , מקסימום 1.3 A

תעודת אחריות

מדיקל קוונט בע"מ נותנת אחריות לפעולתו התקינה של **Handy Cure s'** כפי שמתואר במדריך זה למשך שנתיים מיום הרכישה, בתנאי שהפעלתו והחזקתו יבוצעו בהתאם להוראות המפורטות כאן .
תעודת האחריות אינה מכסה פגמים ומקים הנגרמים כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר, בשוגג או בדרך .

מקרה של תקלה , אנא הביאו תעודת אחריות זו עם ה- **Handy Cure s'**

מדיקל קוונט בע"מ לא תהיה אחראית או מחויבת באופן כלשהו באשר לנזק גופני ו/או נזק לרכוש הנובעים משימוש ב- **Handy Cure s'**, כאשר השימוש מתבצע ללא התאמה מלאה עם הוראות ואזהרות הבטיחות המופיעות במדריכי השימוש הרלוונטיים, לרבות הנספחים, בכל תוויות המוצר, וללא התאמה עם תנאי האחריות והבטיחות של ציוד זה, וכן אם בוצעו ב- **Handy Cure s'** שינויים כלשהם ללא אישור מדיקל קוונט בע"מ.

מס' מכשיר : _____

פרטי הסוכן

סוכן : _____

תאריך רכישה : _____

חתימה וחותמת הסוכן : _____

פרטי לקוח

שם פרטי: _____

שם משפחה: _____

חתימה : _____

